


Phononic Réfrigérateurs et Congélateurs Série C200/F200

Guide De Démarrage Rapide

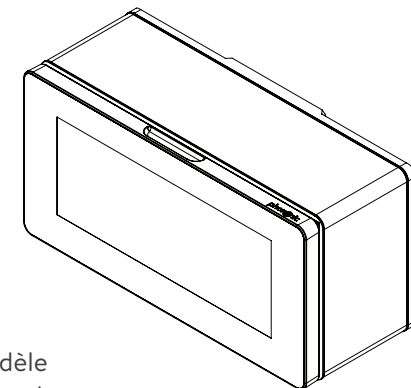

Ce Guide De Démarrage Rapide s'applique aux modèles Phononic suivants:

Réfrigérateurs De Merchandisage C200 (porte pleine ou vitrée)

Congélateurs De Merchandisage F200 (porte pleine ou vitrée)

Micro-Réfrigérateurs De Laboratoire Et Médicaux C200-MB

Micro-Congélateurs De Laboratoire Et Médicaux F200-MB

Pour des instructions détaillées et des précautions de sécurité pour votre modèle spécifique, veuillez vous référer au manuel d'utilisation disponible pour téléchargement sur Phononic.com/support/documentation

Étape 1: Déballage et Contenu

- Déplacez la boîte près de l'emplacement d'installation avant de la déballer. *Il est recommandé que deux personnes retirent l'appareil de l'emballage.*



- Inspectez votre appareil pour tout dommage lié au transport. Ne branchez pas l'appareil s'il y a des signes de dommages.
- Le contenu devrait inclure le réfrigérateur ou le congélateur, un bloc d'alimentation et un bac de rangement clair (installé).
- En cas de contenu manquant ou des dommages à votre unité, contactez le Service Client de Phononic:
Support@Phononic.com
ou **+1.844.476.4202**

Étape 2: Placement et Configuration

- Placez l'unité sur une surface intérieure propre et plane.
- Ne bloquez pas et ne couvrez pas la ventilation à l'arrière de l'unité.
- Pour de meilleures performances, nous recommandons un dégagement arrière minimum de 45 cm pour les congélateurs F200 et 10 cm pour les réfrigérateurs C200. Pour un dégagement dessus / de côté, nous recommandons 5 cm pour tous les modèles.

Si votre unité n'a pas eu d'aimants décoratifs pré-installés, suivez ces étapes d'application:

- Centrez l'aimant long (haut / côtés) sur le dessus et enroulez sur les côtés.
- Retournez l'appareil, enlevez les 4 pattes (pare-chocs ou ventouses).
- Enlevez les rails de l'appareil avec un tournevis. Placez le boulon et la rondelle de côté.
- Alignez les trous des aimants avec les trous au bas de l'unité.
- Placez la rondelle sur le trou et vissez les rails.
- Réinstallez les pattes et retournez l'unité.
- Appliquez un aimant de porte avant (le cas échéant, porte pleine uniquement).

Étape 3: Mise En Marche et Fonctionnement

- Branchez le cordon d'alimentation de l'unité sur une prise secteur 100V.
- Une fois branché, l'unité commencera automatiquement à refroidir.
- **Il n'y a pas d'interrupteur marche/arrêt.**
- Ne chargez pas de produit tant que la température de consigne par défaut n'est pas atteinte.
- Une fois que la température de consigne souhaitée est atteinte, le produit peut être chargé directement dans le bac.
- Le tableau indique le temps approximatif nécessaire pour atteindre la température de consigne préprogrammée dans une température ambiante de 24°C / 75°F.

Produit	Temp Consigné Programmé	Temps d'Abaissement Approximatif
C200	3.3° C	2 heures
C200-MB	2.5° C or 4° C (dépendant du modèle)	2 heures
F200	-18° C	6 heures
F200-MB	-20° C	6 heures

Phononic C200/F200 Series Refrigerators & Freezers

Quick Start Guide

This Quick-Start Guide applies to the following Phononic models:

C200 Merchandising Refrigerators (solid or glass door)


F200 Merchandising Freezers (solid or glass door)

C200-MB Laboratory & Medical Micro Benchtop Refrigerators

F200-MB Laboratory & Medical Micro Benchtop Freezers

For detailed instructions and safety precautions for your specific model, please refer to the user manual available for download at

Phononic.com/support/documentation

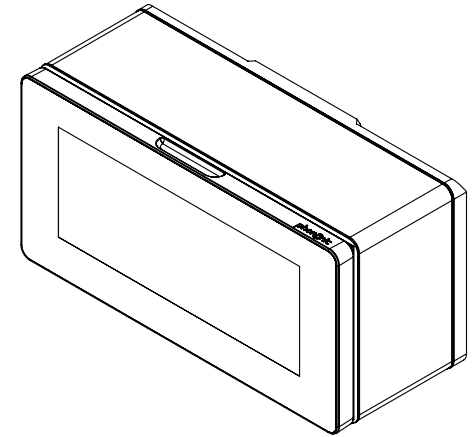

Step 1: Unboxing and Contents

- Move the box near install location before unpacking. *It is recommended that two people remove the unit from the packaging.*
- Inspect your unit for any shipping damage. Do not plug in the unit if there are any signs of damage.
- Contents should include the refrigerator or freezer unit, one power supply and clear storage bin (installed).
- If there are missing contents or damage to your unit, contact Phononic Customer Care: **Support@Phononic.com** or **+1.844.476.4202**



Step 2: Placement and Set Up

- Place the unit on a clean, flat, indoor surface.
- Do not block or cover the ventilation on the back of the unit.
- For best performance, we recommend a minimum rear clearance of 45cm for the F200 freezers and 10cm for the C200 refrigerators. For top/side clearance, we recommend 5cm for all models.

If your unit has not been pre-installed with decorative magnets, follow these application steps:

- Center the long (top/sides) magnet on top and wrap over the sides.
- Turn the unit over, remove the 4 feet (bumper or suction cups).
- Remove the rails from the unit with a screwdriver. Place the bolt and washer aside.
- Align magnet holes with the holes on the bottom of unit.
- Place washer on the hole and screw in the rails.
- Re-install the feet and turn unit back over.
- Apply front door magnet (if included, solid door only).

Step 3: Power On and Operation

- Connect the unit power supply cord to a 110V AC wall outlet.
- Once plugged in, the unit will automatically begin cooling.
- **There is no on-off power switch.**
- Do not load product until the default set-point temperature is reached.
- Once desired set-point temperature is reached, product may be loaded directly into the bin.
- The table shows approximate time to reach the pre-programmed set-point temperature in an ambient temperature of 24°C / 75°F.

Product	Programmed Set Temp	Approximate Pull Down Time
C200	3.3° C	2 hours
C200-MB	2.5° C or 4° C (model dependant)	2 hours
F200	-18° C	6 hours
F200-MB	-20° C	6 hours